

# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


## Двухканальный массажер-миостимулятор Elvion



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Об устройстве .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>2. Использование .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>3. Хранение и обслуживание .....</b>                      | <b>4</b> |
| <b>4. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>4</b> |
| Товар надлежащего качества .....                             | 5        |
| Товар ненадлежащего качества .....                           | 6        |

## 1. Об устройстве

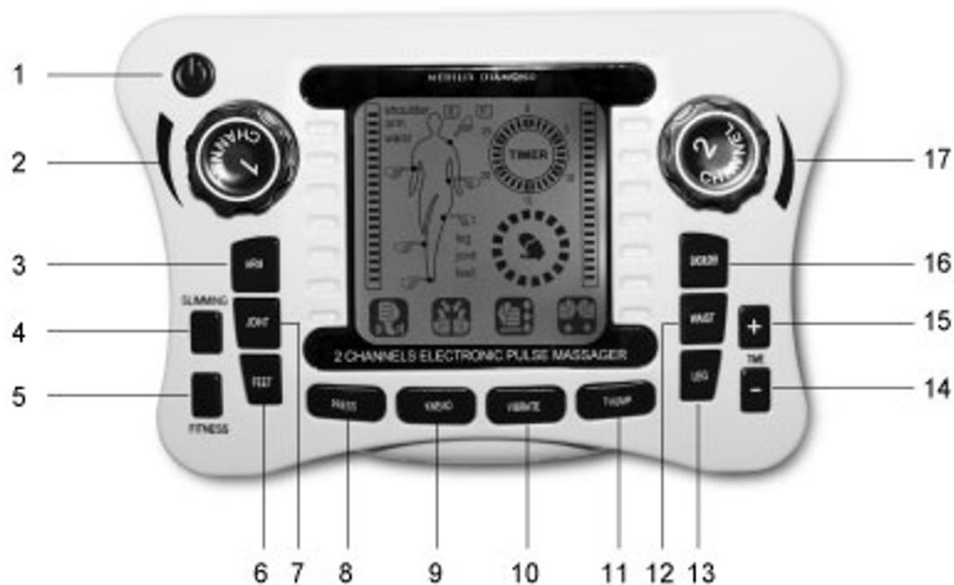

- |                                           |                                            |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Вкл/Выкл;                              | 12. Талия;                                 |
| 2. Переключатель интенсивности (Канал 1); | 13. Ноги;                                  |
| 3. Рука;                                  | 14. Время (-);                             |
| 4. Похудение;                             | 15. Время (+);                             |
| 5. Фитнес;                                | 16. Плечо;                                 |
| 6. Ступни;                                | 17. Переключатель интенсивности (Канал 2); |
| 7. Суставы;                               | 18. Массажные тапочки;                     |
| 8. Нажатие;                               | 19. Электроды;                             |
| 9. Разминание;                            | 20. Двойной электродный провод;            |
| 10. Вибрация;                             | 21. Питание.                               |
| 11. Постукивание;                         |                                            |



18



19



20



21

## 2. Использование

- Откройте отсек для батареек, вставьте четыре батарейки по 1,5 В и закройте отсек. (Также можно использовать адаптер питания на 6 В.)
- Прикрепите электроды к соответствующим частям тела, которые необходимо массировать, затем правильно подключите провод к электродам.
- Включите устройство с помощью кнопки питания. На экране отобразится схема режима работы согласно руководству. Вы можете выбрать различные режимы терапии (нажатие, разминание, вибрация и постукивание) по личным предпочтениям.
- Скорость и интенсивность терапии можно гибко настраивать — используйте регулятор интенсивности на основном устройстве, чтобы увеличить или уменьшить силу воздействия.
- Также можно нажать кнопки «РУКА», «СУСТАВ», «СТОПА», «ПЛЕЧО», «ТАЛИЯ» и «НОГА» для выбора зоны терапии.
- Стандартное время работы устройства — 30 минут. Оно автоматически выключается по истечении этого времени. Также имеется функция самопроверки: если электроды будут сняты с кожи, устройство автоматически отключится через 5 секунд.
- Аппарат можно использовать для массажа стоп, подключив провод к электродам и надев специальные массажные тапочки.

8. Двухканальная система позволяет использовать устройство одновременно двум людям, при этом интенсивность и время можно настраивать отдельно.

9. При завершении сеанса сначала выключите устройство с помощью кнопки питания, затем при необходимости сбросьте настройки, чтобы использовать аппарат снова.

Никогда не используйте прибор вместе со следующими медицинскими устройствами: регулятором пульса, искусственным кардиостимулятором и электрокардиографом.

Не размещайте электроды на предсердечной области, на сонной артерии и в области талии беременной женщины.

Людям с серьезными заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед использованием устройства.

Запрещается разбирать, ремонтировать самостоятельно или модифицировать устройство.

Не прикасайтесь к электродам металлическими предметами, такими как часы, цепочки и т.п., когда устройство работает.

Не используйте устройство, если чувствуете дискомфорт или появляются раздражения на коже.

Не используйте устройство во влажных условиях, например, в ванной.

### **3. Хранение и обслуживание**

Для очистки устройства используйте влажную ткань или нейтральное чистящее средство. Не применяйте летучие жидкости, такие как бензол, растворитель или бензин;

Храните устройство вдали от магнитных полей;

Держите устройство подальше от огня, источников тепла и воды. Не оставляйте его под прямыми солнечными лучами в течение длительного времени;

Если устройство не используется, извлеките батарейки.

### **4. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#).

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!