



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Массажер для ног FEET RELAX серый (LF-29)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание устройства	3
2. Техника безопасности	3
3. Устройство и функции массажёра	3
4. Контрольная панель массажёра	4
5. Инструкция по работе с массажёром	4
6. Уход и хранение	5
6.1 Чистка массажёра	5
6.2 Хранение	5
7. Характерные неисправности и методы их устранения	6
8. Технические характеристики	6


1. Описание устройства

Благодарим Вас за покупку нашего массажёра FEET RELAX (LF-29). Специальные воздушные подушки, подогрев и вибрация вкупе оказывают эффективное расслабляющее воздействие на ваши ступни. В результате вы сможете полностью расслабиться, предотвратить появление варикоза и других заболеваний ног, повысить общий тонус организма, укрепить иммунитет. Время работы массажёра можно настроить до 15 минут непрерывного массажа.

2. Техника безопасности


- Не используйте сразу после еды, чтобы избежать дискомфорта.
- Во время работы не засыпайте, сидя в нём.
- Не используйте, когда вы пьяны или больны.
- Не используйте во время грозы.
- Не протирайте бензином, разбавителем и т. д.
- Не размещайте этот продукт рядом с легковоспламеняющимися материалами.
- При использовании продукта не курите во избежание возгорания.
- Пожалуйста, не позволяйте людям с ограниченными интеллектуальными возможностями использовать его в одиночку.
- Этот продукт предназначен только для одного человека. Пожалуйста, не используйте для двух и более людей одновременно.
- Если шнур питания поврежден, прекратите его использование.
- Пожалуйста, не повреждайте, не перегибайте, не тяните, не перекручивайте и не завязывайте шнур питания.
- Не позволяйте несовершеннолетним использовать этот продукт.

3. Устройство и функции массажёра

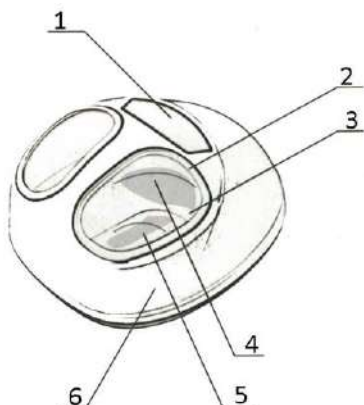

- 1) Контрольная панель;
- 2) Молния;
- 3) Снимаемый чехол;
- 4) Подушка;
- 5) Дно массажной подушки;
- 6) Корпус массажёра;

4. Контрольная панель массажёра

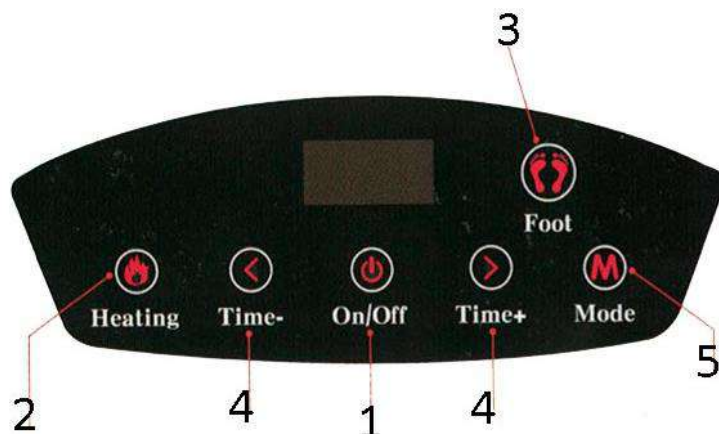

- 1) Нажмите кнопку Вкл / Выкл, чтобы включить или отключить питание.
- 2) Нажмите кнопку Heating, чтобы включить функцию подогрева. Загорится индикатор. Нажмите еще раз, чтобы выключить подогрев.
- 3) Нажмите кнопку Foot 1, 2, 3 или 4 раза, чтобы переключиться между соответственно нулевой, первой второй и третьей передачами. Чем выше передача, тем быстрее цикл.
- 4) Нажмите кнопку Time +, чтобы увеличить время массажа и Time -, чтобы уменьшить.
- 5) Нажмите кнопку Mode, чтобы переключиться между режимами.

Внимание

- Следите чтобы на контрольную панель массажёра не попадала вода.
- Не зажимайте кнопку Вкл / Выкл, чтобы избежать программных ошибок.
- Во время использования, если произойдет сбой питания, выключите массажёр и выньте вилку из розетки.
- Не вставляйте руки и пальцы в зазоры массажёра во избежание травм.
- Не позволяйте детям и домашним животным играть с устройством.
- Не используйте изделие без чехла.
- Не вставляйте и не садитесь на прибор и не ставьте тяжёлые предметы на него.
- Не тяните за шнур питания.

5. Инструкция по работе с массажёром

- 1) Установите массажёр на полу не ближе, чем в метре от аудио-видео аппаратуры, таких как телевизор или радио.
- 2) Включите массажёр в сеть.

- 3) Сядьте на стул, подходящий вам по высоте и вставьте ноги в массажёр.
- 4) Нажмите кнопку Вкл / Выкл на контрольной панели, чтобы массажёр начал программу массажа.
- 5) После использования нажмите кнопку Вкл/ Выкл на контрольной панели. Вытащите вилку из розетки.

6. Уход и хранение

6.1 Чистка массажёра

- Перед чисткой убедитесь, что массажёр выключен и не подключен к сети.
- Мягкой тканью протрите поверхность массажёра.
- Для сильных загрязнений используйте тряпку, смоченную водой или мыльным раствором.
- Не тяните и не вставляйте вилку в розетку мокрыми руками.
- Не обмывайте изделие водой. Не наливайте воду или другие жидкости внутрь изделия.
- Никогда не используйте агрессивные чистящие средства, такие как бензин или растворитель, для чистки, так как это может привести к повреждению устройства.

6.2 Хранение

- Убедитесь, что массажёр выключен, а сетевой шнур вынут из розетки.
- Содержите изделие в чистоте и вдали от высокой влажности, высоких температур.
- Если вы не используете массажёр в течение длительного времени, положите его в упаковочную коробку, чтобы в него не попала пыль.
- Не размещайте изделие в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур, во избежание выцветания.

Внимание

Если вы обнаружили одну из следующих проблем, прекратите использование продукта, чтобы предотвратить поломку товара и травмы.

- Запах горелого;
- Шнур питания нагревается;
- Питание то включается, то отключается;
- Другие неисправности;

7. Характерные неисправности и методы их устранения

	Неисправность	Причина	Решение
1	Шум во время работы	Шум возникает из-за трения внутренних частей массажёра друг об друга и о тканевый чехол	Не требует решения
2	Массажёр не запускается	Вилка выскочила из розетки	Включите в сеть
		Не нажата кнопка включения	Нажмите кнопку включения
		Сработала защита от нагревания	Включите спустя 30 минут
3	Массажёр прекратил работать	Время работы массажёра, установленное по умолчанию кончилось	Включите спустя 10 минут

8. Технические характеристики

- Модель: LF 29;
- Напряжение: 220-240 В;
- Мощность: 48 Вт.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**