



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Лазерный эпилятор для домашнего
использования ClearSkin Basic**



СОДЕРЖАНИЕ


1. Описание устройства	3
2. Тест на чувствительность.....	4
3. Настройка уровня облучения	5
4. Запрещено использование лазерного эпилятора	5
5. Перед использованием	6
6. Использование.....	6
7. Курс применений.....	7
8. После эпиляции	7
9. Уход и обслуживание	7
10. Устранение неисправностей.....	8
11. Меры предосторожности	9

1. Описание устройства

В приборе используется технология фотонной косметической технологии IPL и интенсивный импульсный свет для прямого облучения кожи для создания фотобиохимических эффектов. С одной стороны, коллагеновые волокна и эластиновые волокна в коже могут быть перестроены, эластичность кожи может быть восстановлена, может быть улучшена микроциркуляция крови, могут быть устранены или уменьшены морщины; с другой стороны, интенсивный импульсный свет может проникать через кожу и поглощаться пигментами и капиллярами в тканях. Тепловая энергия может вызвать свертывание крови и нагрев пигментов, не разрушая нормальные ткани кожи.

Решая, тем самым проблему расширенных капилляров, удаляя пигментные пятна, а также удаляя нежелательные волосы и т. д.



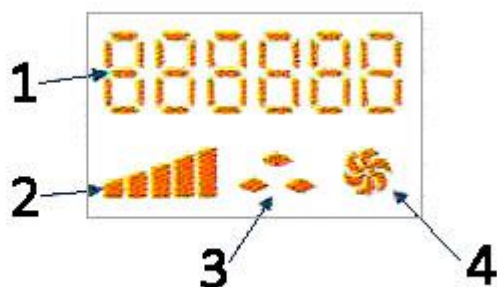

1. Количество вспышек;
2. Уровень;
3. Режим вспышки;
4. Иконка работы вентилятора.

2. Тест на чувствительность

Перед первым использованием лазерного эпилятора или после загара, проведите тест на чувствительность кожи к облучению.














Цель теста на чувствительность состоит в том, чтобы проверить реакцию кожи на лазер и определить соответствующую интенсивность света для каждой части тела.

1. Выберите участок кожи, близкий к тому, который вы планируете эпилировать.
2. Включите питание прибора и выберите настройку 1 по умолчанию.
3. Приложите аппарат к коже, затем нажмите на кнопку, чтобы он испустил вспышку.
4. Подождите 24 часа, чтобы проверить, есть ли на коже какие-либо реакции. Если кожа реагирует, снизьте уровень воздействия на то, что не вызовет кожной реакции. Используйте его в последующем курсе эпиляции.

3. Настройка уровня облучения

Лазерный эпилятор ClearSkin Basic можно применять, чтобы удалить волосы на губах, в подмышечных впадинах, волосы на конечностях, линия роста волос на лбу, а также другие нежелательные волосы.

Безболезненная эпиляция подходит для черных и темных волос, а не для белых, седых, золотистых и рыжих волос. Внимательно изучите таблицу ниже, чтобы подобрать подходящий именно для вашего фототипа уровень лазерной эпиляции.

Цвет волос \ Цвет кожи						
	Оч. светлая	Светлая	Светло - оливковая	Темно - оливковая	Темно - коричневая	Темная
Седые 	×	×	×	×	×	×
Рыжие 	×	×	×	×	×	×
Светло-русые 	×	×	×	×	×	×
Темно-русые 	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Каштановые 	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Темно-каштановые 	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×
Черные 	3/4/5	3/4/5	3/4/5	1/2	×	×

4. Запрещено использование лазерного эпилятора

1. Людям с кожными сенсорными нарушениями.
2. Людям, имеющими следующие кожные заболевания: аллергический дерматит, экзема и другие кожные заболевания.
3. Беременным женщинам, женщинам в период менструации и кормления грудью.
4. Тем людям, кто подвергался воздействию прямых солнечных лучей в течение последних двух недель.

5. Перед использованием

1. Сначала сбейте волосы с поверхности кожи. Перед бритьем необходимо нанести на кожу увлажняющее средство, мыло, гель для душа или кондиционер для волос, чтобы облегчить процесс бритья волос. В противном случае «сухое бритье» легко поранит поверхность кожи.
2. Очистите кожу, убедитесь, что на ее поверхности нет волос, она полностью высохла и не покрыта косметическими средствами. Перед использованием фотонного депилятора категорически запрещается наносить крем, гель алоэ вера и другие средства.

В противном случае это не приведет к потере света.

6. Использование

1. Перед использованием очистите с помощью ватного тампона или чистой ткани, смоченным в медицинском спирте. Используйте эпилятор только тогда, когда он полностью сухой, иначе это повлияет на световой поток.
2. Вставьте вилку в розетку. Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 3 секунд. Отобразится количество оставшихся вспышек, уровень облучения, значок вращения вентилятора;
3. Кнопка включения питания также является кнопкой выбора уровней воздействия. Нажмите на «шестеренку», чтобы выбрать соответствующую настройку.
4. Приложите эпилятор к участку кожи, с которого заранее были удалены волосы.
5. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы войти или выйти из режима автоматического включения подсветки. Три призмы на экране загорятся, обозначая включение автоматического режима вспышки.
6. Обработайте весь участок кожи три раза. Обратите внимание, что не следует делать три вспышки на одном и том же месте. Пройдите всю область трижды.
7. После использования депилятора нанесите гель алоэ вера.
8. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы выключить аппарат.
9. Дайте устройству остыть.
10. Очистите рамку эпилятора спиртом.

7. Курс применений

Срок	Частота	Результат
1-4 недели	2-3 в неделю	Более 75% волос удаляется естественным путем.
5-6 недель	2 в неделю	Новые волосы тоньше, растут медленнее
7-8 недель	1 в неделю	Растет меньше волос, они тоньше
Больше 8 недель	1-2 в неделю	Использование по необходимости

Курс эпиляции - 3-х кратное облучение. Облучив область эпиляции один раз, сделайте второй и третий раз. Не светите в одном и том же месте.

Чем выше уровень облучения, тем лучше эффект. На ранней стадии рекомендуется сначала использовать 1-2 уровни. После адаптации кожи на более позднем этапе вы можете использовать 3-5 передачи. Интервал курса зависит от скорости роста ваших волос, и оттого, на какой из частей тела вы будете использовать эпилятор.

8. После эпиляции

1. Кожа может быть слегка покрасневшей или теплой, её может покалывать. Эти реакции были совершенно безвредны и вскоре исчезнут.
2. Через 2 часа после работы с аппаратом можно нанести на место обработки эмульсию, крем, увлажняющее средство или косметику. Если после окончания процедуры на коже появляется покалывание или покраснение, подождите, пока ощущения исчезнут, а затем нанесите любой продукт на кожу. Если после нанесения продукта на коже появляется покалывание, смойте продукт водой.

9. Уход и обслуживание

1. Выключите питание прибора сразу после использования, выньте вилку из розетки и дайте прибору остыть.
2. Смочите мягкую ткань небольшим количеством воды, затем используйте ее для очистки следующих частей: фильтр, пленка для контакта с кожей.
3. Храните прибор в сухом, непыльном месте при температуре от 0 до 60 градусов Цельсия.

10. Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Нагревается эпилятор и адаптер питания	Нормальное явление	Никаких действий не требуется
Вентилятор шумит, вспышки нет	Требуется перезагрузка	Перезагрузите аппарат
Появляется запах	Фильтры грязные	Очистите фильтр
	Волосы не удалены, появляется запах от паленых волос	Убирайте волосы с кожи перед началом эпиляции
Сильная боль во время и после использования	Слишком сильный уровень воздействия	Снизьте силу воздействия
	Волосы не удалены	Убирайте волосы с кожи перед эпиляцией
	УФ-фильтр поврежден	Прекратите использование
	Используется на участках тела, которые не подходят для данного эпилятора	Запрещено использование на ареолах, сосках, малых половых губах, вагине, анусе, ноздрях, внутреннем ухе, мошонке. Мужчинам на лице.
Не устраивает результат	Слишком сильный уровень воздействия	Увеличьте уровень воздействия
	Слишком большой зазор между участками	Обрабатывайте участки как можно ближе друг к другу.
	Устройство не подходит под ваш тип волос	Аппарат не подходит под русые, св-русые и рыжие волосы. Для лучшего результата, сократите время между обработками. Не чаще раза в сутки.
	Недостаточная частота использования. Замедленная реакция на лазерное удаление	Используйте на протяжении шести месяцев. В течение этого времени скорость роста волос снизится.

11. Меры предосторожности

1. Во время работы не должны смотреть прямо на вспышку. Не направляйте прямо в глаза.
2. После эпиляции вы можете наблюдать легкое покраснение кожи. Кожу можно охладить льдом или самоохлаждением.
3. При очистке от грязи не распыляйте спирт прямо на люминесцентную лампу.
4. Не наносите никакие косметические средства на кожу во время эпиляции.
5. Старайтесь не есть пищу, вызывающую аллергическую реакцию (например, шпинат, рапс, горчицу и т. Д.) перед и во время эпиляции.
6. Чем сильнее уровень воздействия лазерного эпилятора, тем лучше эффект. Не повышайте больше, чем рекомендовано в таблице выше.
7. Люди с более темной кожей могут иметь отсроченные кожные реакции. Не увеличивайте силу воздействия, потому что немедленная реакция неочевидна.
8. Следите за увлажнением кожи и не используйте солнцезащитный крем после обработки.
9. Избегайте ультрафиолетового излучения во время использования аппарата. Хорошо защитите кожу от солнца, избегайте компьютерного излучения, насколько это возможно, нанесите защитный слой солнцезащитного крема.
10. Не закрывайте воздухозаборник и радиатор во время использования, чтобы не влиять на рассеивание тепла от аппарата.
11. Если в процессе использования инструмента к пластику на краю выхода прилипают волосы или иные загрязнения, пластик на краю выхода может почернеть, но это не повлияет на производительность и нормальное использование инструмента.
12. "Светоизлучающая трубка" внутри люминесцентного выхода прибора будет постепенно чернеть на внутренней стенке, что относится к нормальному процессу старения трубки. Скорость затухания энергии не будет превышать предписанный диапазон в течение периода службы и может использоваться в обычном режиме.
13. Изделие не является водонепроницаемым. Пожалуйста, не используйте его в ванной, в душе или в других местах, где можно легко соприкоснуться с водой.
14. Если корпус продукта, окно сломано или инструмент неправильно работает, отправьте его обратно производителю для ремонта, чтобы

определить, можно ли его отремонтировать и использовать повторно.
Если он находится под напряжением, отключите источник питания и не включайте, отправьте в сервис.

15. Избегайте хранения в местах с сильным магнитным полем и сильной влажностью, запыленностью или высокой температурой.

16. Не подвергайте инструмент сильным ударам и падениям.

17. Запрещается использовать этот продукт для других целей, кроме указанных выше функций.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**