



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Лазерный эпилятор IPL для
домашнего использования**

Silked W-1092




СОДЕРЖАНИЕ

1. Описание аппарата	3
2. Тест на чувствительность кожи	3
3. Использование по типу кожи	4
4. Противопоказания	4
5. Подготовка к использованию	5
6. Работа с устройством	5
7. Курс эпиляций	6
8. Уход за кожей	6
9. Обслуживание	6
10. Распространенные проблемы и их устранение	7
11. Меры предосторожности	7

1. Описание аппарата

В приборе используется технология IPL для обработки кожи и получения фотобиохимического воздействия. Устройство может восстановить регенерацию коллагеновых и эластиновых волокон в коже, улучшить упругость кожи, микроциркуляцию крови, уменьшить морщины. Сильный импульсный свет проникает через кожу и избирательно поглощается группой пигментов, удаляет пигментные пятна и нежелательные волосы.

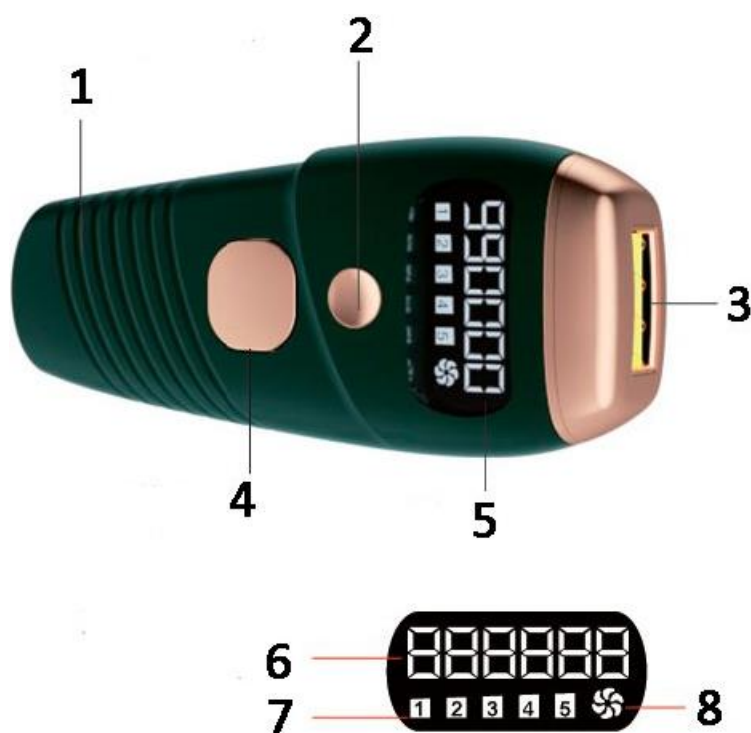

1. Разъем для зарядки;
2. Кнопка Вкл / Выкл;
3. Световое окно;
4. Кнопка вспышки;
5. Дисплей;
6. Счётчик вспышек;
7. Уровни воздействия;
8. Иконка вентилятора.

2. Тест на чувствительность кожи

Если вы используете этот аппарат впервые или недавно загорели, необходимо провести кожные пробы на каждом участке кожи.

Тест необходим, чтобы проверить, как реагирует кожа. Определить правильную настройку интенсивности света для каждой части тела.

1. Выберите участок кожи для облучения. Не пытайтесь использовать аппарат в сложных или чувствительных зонах (лодыжки или косточки).
2. Включите устройство. Убедитесь, что выбран первый уровень.
3. Поместите устройство вертикально на кожу так, чтобы световое окно соприкасался с кожей.
4. Нажмите кнопку вспышки, чтобы начать облучение.
5. Переместите аппарат по коже к следующему участку.

6. Пошагово увеличивайте настройку, делайте вспышку, а затем перемещайте устройство в следующее место.
7. Повторите это для всех уровней вспышки в пределах рекомендуемого для вашего типа кожи диапазона.
8. После теста на чувствительность проверяйте состояние кожи в течение 24 часов. Если на месте облучения не появилось покраснений, волдырей и других аномалий, можете смело использовать это устройство.

3. Использование по типу кожи

Сферы применения: верхняя губа, подмышечная впадина, линия роста волос на лбу, волосы на туловище и конечностях. Эпилятор подходит для использования на черных и темных волосах на светлой коже. Воспользуйтесь таблицей ниже, для более подробной информации.

Цвет кожи \ Цвет волос	Цвет волос					
	Оч. светлая	Светлая	Светло-оливковая	Темно-оливковая	Темно-коричневая	Темная
Седые	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Рыжие	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Светло-русые	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗	⊗
Темно-русые	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
Каштановые	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
Темно-каштановые	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗
Черные	✓	✓	✓	✓	⊗	⊗

4. Противопоказания

- Запрещено использование людям с нарушением осязания.
- Людям, болеющим аллергическим дерматитом, экземой, другими кожными заболеваниями. Людям, склонным к аллергиям.
- Беременным или кормящим женщинам, женщинам в период менструации.
- Людям, которые находились на солнце, не следует использовать эпилятор в течение двух недель.

5. Подготовка к использованию

1. Сбрейте волосы с выбранного вами участка кожи. Используйте мыло или гель для душа, для более комфортного бритья.
2. Очистите кожу. На ней не должно быть волос, она должна быть абсолютно сухая и не жирная. Не используйте никаких уходовых средств перед эпиляцией.

6. Работа с устройством

1. Протрите ватным тампоном или мягкой тканью, смоченными в медицинском спирте, стеклянное окошко и корпус эпилятора. Дождитесь полного высыхания устройства перед использованием.
2. Вставьте вилку в розетку, нажмите и удерживайте кнопку выключения в течение 3 секунд. На экране отобразится счётчик вспышек, уровень воздействия и значок вентилятора.
3. Кнопкой Вкл / Выкл выберите нужный уровень лазерного воздействия.
4. После завершения настройки, приложите эпилятор к коже и нажмите кнопку вспышки, чтобы обработать участок.
5. Чтобы включить (выключить) режим автоматической вспышки, нажмите и удерживайте кнопку вспышки в течение 3 секунд.
6. Обработайте выбранный вами участок кожи два раза, но не оставляйте эпилятор на месте для двух последовательных вспышек. Пройдите полностью участок, затем повторите еще раз.
7. После использования устройства нанесите гель алоэ вера.
8. После использования аппарата нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 секунд, чтобы выключить его. Отключите от сети.
9. После использования на эпиляторе могут появиться маленькие черные пятна, сотрите их спиртом.

7. Курс эпиляций

Время использования	Кол-во процедур	Эффект
1-4 неделя	2-3 раза в неделю	Удаляется до 75% волос
5-6 неделя	2 раза в неделю	Удаляются волоски, подавляется рост новых
6-7 неделя	1 раз в неделю	волосы становятся тоньше и меньше, перестают расти
7-8 неделя	1-2 раза в неделю	Обработка проводится после того, как волосы отрасли

Одна процедура состоит из 3 облучений. После завершения первой эпиляции проведите вторую и третью. Не обрабатывайте лазером одно место 3 раза.

Чем выше уровень воздействия, тем лучше результат эпиляции. В первые недели используйте первый или второй уровень воздействия. После того как кожа адаптируется, можете переключить на 3-5 уровень.

8. Уход за кожей

1. На коже может появиться легкое покраснение, отек. Вы можете почувствовать покалывание или тепло. Эти реакции безвредны и быстро проходят;
2. Через два часа после эпиляции можно нанести уходовые средства на кожу, такие как лосьон, крем, дезодорант, увлажняющие средства или косметику. Если после процедуры кожа раздражена, покраснела и опухла, подождите, пока данный эффект исчезнет. Если после нанесения средства на кожу появляется покалывание или раздражение, смойте его водой.

9. Обслуживание

1. После использования сразу отключите питание устройства.
2. Выньте вилку и дайте аппарату остыть.
3. Смочите чистую мягкую ткань небольшим количеством воды.
4. Очистите ею фильтр и поверхности, контактирующие с кожей.
5. Храните прибор в сухом темном месте при температуре от 0 до 60 °С.
6. Утилизируйте прибор в соответствии с местным законодательством.

10. Распространенные проблемы и их устранение

Проблема	Причина	Решение
Устройство или адаптер нагревается	Нагревание — это нормальное явление	Ничего предпринимать не следует
Индикатор не горит, вентилятор работает	Сработала защита от перегрева.	Не отключайте питание сразу. Через 15 минут перезагрузите аппарат
Запах во время использования	Используется грязный эпилятор	Очистите эпилятор от загрязнений и волос
Нестерпимая боль во время использования, чувствительная кожа после использования	Слишком высокий уровень воздействия	Снизьте уровень лазерного излучения
	Волосы не сбриты	Сбрейте волосы перед использованием аппарата
	Световое окно или лампа повреждены	Прекратите использование устройства
	Использование устройство на неподходящих участках тела. Фототип не подходит для данного эпилятора	Не используйте устройство на сосках, ареоле, половых губах, влагалище, анусе, ноздрях и ушах. Мужчинам: на лице и мошонке
Недостаточный результат использования	Слишком низкий уровень воздействия	Увеличьте уровень воздействия
	Слишком большой зазор между участками	Обрабатывайте участки кожи так близко, как это возможно
	Устройство не подходит для вашего типа волос.	Не подходит для светло-русых, рыжих, седых волос, волос цвета блонд.
	Не соблюдается частота использования устройства	Используйте на протяжении шести месяцев.

11. Меры предосторожности

1. Во время работы не смотрите прямо на вспышку. Не направляйте эпилятор в лицо.
2. После эпиляции может появиться легкое покраснение кожи, которое можно снять ледяным компрессом или оно пройдет само по себе.
3. Регулярно чистите световое окно. Для этого распылите спирт прямо на него и протрите мягкой тканью.

4. При работе с инструментом нельзя наносить на кожу какие-либо косметические средства.
5. Отрегулируйте уровень излучения под ваши потребности. Чем выше уровень воздействия, тем лучше эффект. Следите за тем, чтобы излучение не оставляло ожогов.
6. Люди с более темной кожей могут иметь отсроченную кожную реакцию. Не нужно увеличивать лазерное воздействие, потому что реакция проявится позже.
7. Увлажняйте кожу после эпиляции, защищайте ее от солнца.
8. Избегайте воздействия ультрафиолетовых лучей во время использования эпилятора. Защищайте кожу от солнца при выходе на улицу, старайтесь избегать компьютерного излучения на работе, наносите солнцезащитный крем перед выходом на улицу.
9. Во время использования не закрывайте воздухозаборное отверстие, чтобы не повлиять на работу аппарата.
10. Если в процессе использования волосы или прилипнут к пластику на краю светового окна, пластик почернеет и может оставить черные пятна, но это не повлияет на характеристики и нормальное использование инструмента.
11. По мере использования эпилятора, лампа будет постепенно темнеть, это нормальное явление для данного типа ламп.
12. Изделие не является водонепроницаемым. Не используйте его в ванной, душе или любом другом месте, где на него легко может попасть вода.
13. Если корпус или световое окно повреждены или инструмент случайно погрузился в воду, отправьте его на ремонт, чтобы определить, можно ли его снова использовать. Если эпилятор упал в воду под напряжением, отключите питание, прежде чем прикасаться к прибору.
14. Избегайте хранения в местах с сильным магнитным полем, сильной влажностью и пылью или в местах с высокой температурой.
15. Не подвергайте инструмент сильным ударам и падениям.
16. Запрещается использовать продукт для целей, отличных от указанных в инструкции функций.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**