



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Мини Wi-Fi эндоскоп для ушей



СОДЕРЖАНИЕ

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ	3
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОДУКТУ.....	3
КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ?	5
КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПЬЮТЕРУ?	7

ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ

Дети не могут использовать его в одиночку.


При его использовании обратите внимание на следующие моменты.

1. Продукт не является водонепроницаемым. Не стирать, пожалуйста, протрите его спиртом.
2. Лучшее фокусное расстояние камеры составляет 1,4-2 см.
3. Пожалуйста, будьте осторожны при использовании продукта, не прикасайтесь к барабанной перепонке.
4. При использовании, внимательно прочитайте инструкцию.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Это инструмент для чистки ушных раковин Wi-Fi HD, который включает в себя мини-камеру диаметром 55,5 мм и несколько сменных принадлежностей с ушным вкладышем, с хлопком. Он может быть подключен к различным типам смартфонов, планшетов, ноутбуков и ПК. Легко просматривать видеозапись и поддерживает фотографии и видео одновременно. Изображения и видео файлы могут отображаться и сохраняться на вашем телефоне или компьютере.

Введение:

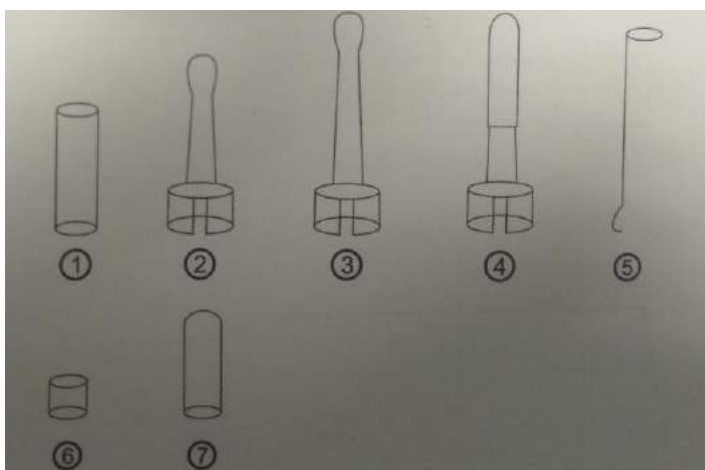


Аксессуары	Роль
1 Защитный рукав	Для защиты барабанной перепонки
2 Детский ушной вкладыш	От вреда
3 Взрослый ушной вкладыш	Очистка ушной серы


4 Хлопковая головка	Очистка ушной серы
5 Ушная ложка	Очистка ушной серы
6 Фиксированный чехол	Фиксированная ушная ложка
7 Защитный чехол	Для защиты камеры

Сборка ушной ложки:


1. Сборная ушная ложка

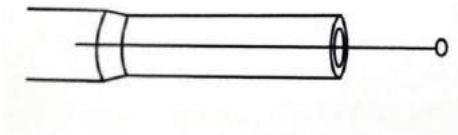

2. Фиксированная ушная ложка

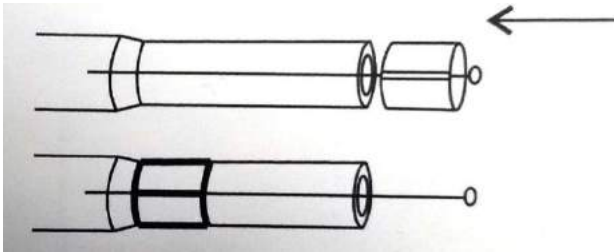


3. Сборка хлопковой головки и клейкой головки:

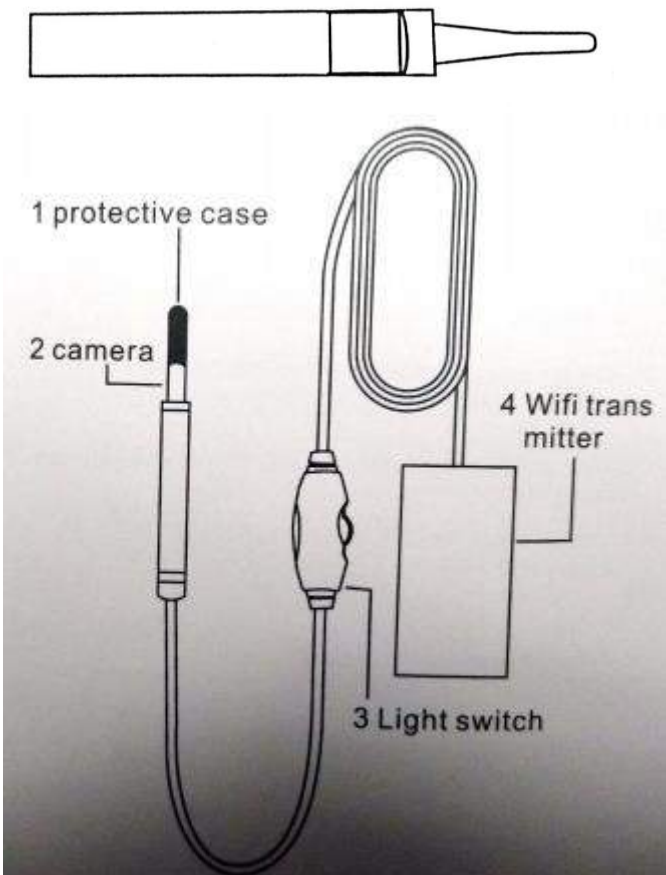

1. Защитный чехол

2. Камера
3. Выключатель света
4. wi-fi передатчик

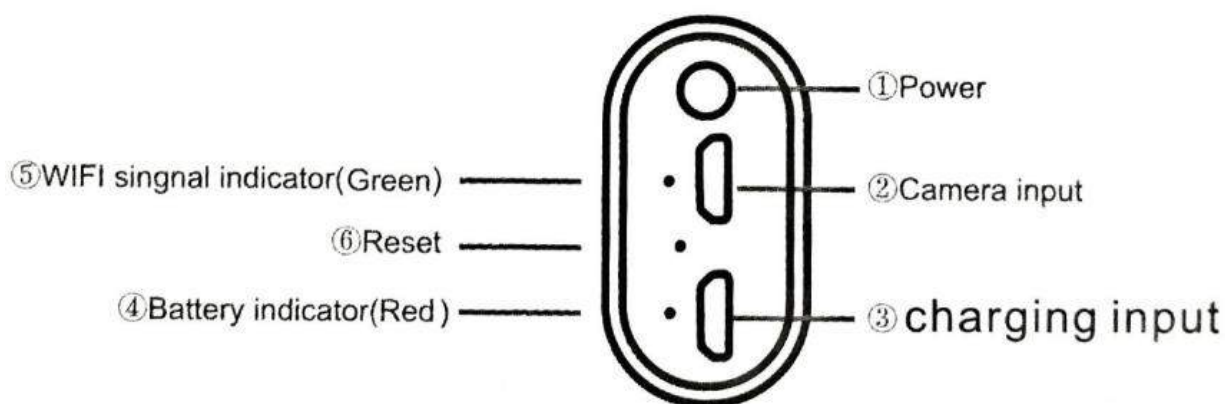

1. Мощность
2. Вход для камеры
3. Вход для зарядки
4. Индикатор батареи (красный)
5. Wi-fi индикатор (зеленый)
6. Перезагрузка

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА МОБИЛЬНОМ ТЕЛЕФОНЕ?


- 1) Загрузите и установите приложение.

Откройте магазин приложений с чистой стороны iPhone / iPad. Найдите область HD, нажмите на загрузку и установите ее. Или отсканируйте QR-код и загрузите его.

Войдите в Google Play Shop на Android. Найдите область действия HD, нажмите «Загрузить» и установите ее. Можно использовать Google, отсканируйте первый QR-код, если вы и выберите вторую строку. Если вы не можете; просканируйте QR-код и выберите третью строку.


- 2) Подключите камеру с беспроводной передачей
- 3) WIFI-соединение
 - 1.Нажмите значок настройки на главном интерфейсе интеллектуального мобильного устройства.

2.Нажмите «Wlan», выберите свою камеру, подключите интеллектуальное мобильное устройство, подключитесь к инструменту Wi-Fi, начальный SSID инструмента: HD сфера, нажмите ее, и она подключится автоматически.

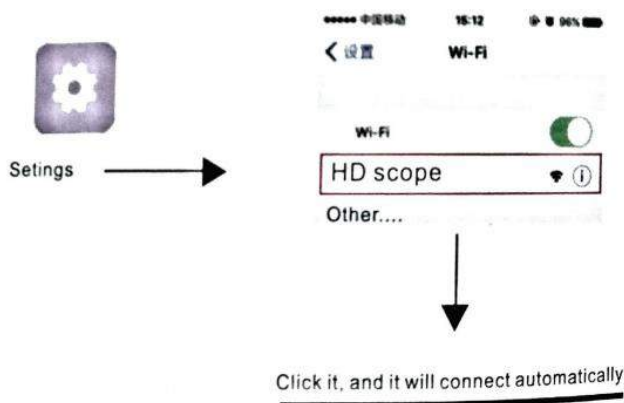

1.После того, как соединение установлено успешно, нажмите на значок HD и нажмите «Воспроизвести», чтобы автоматически войти в подключенную камеру для просмотра видео в реальном времени.

2. Съемка фотографий, запись видео, просмотр изображений и воспроизведение видео, настройка и др. операции могут быть выполнены в приложении.

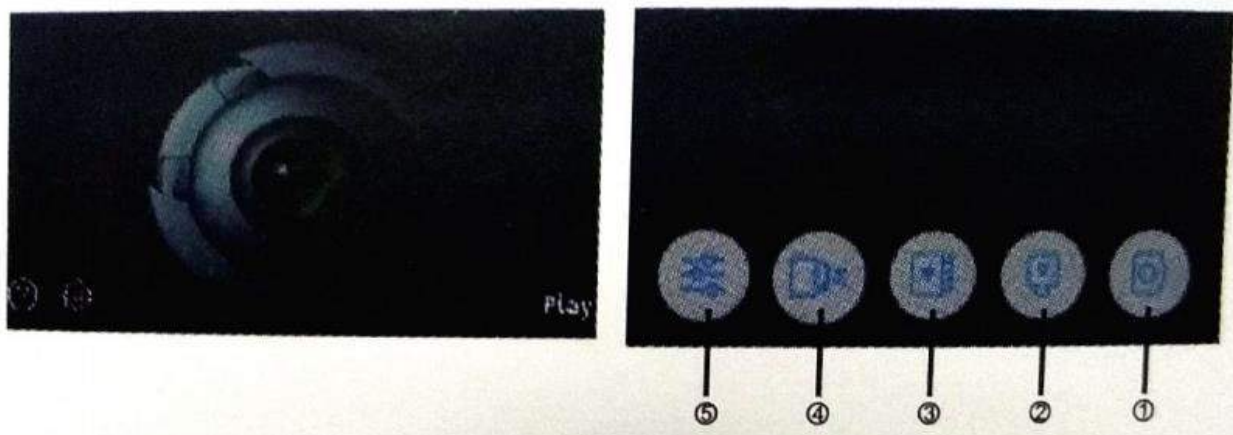


1.Фотографировать: нажмите на него, чтобы сделать фотографии, и фотографии будут автоматически сохранены в интеллектуальном мобильном устройстве.

2. Видеозапись: нажмите на нее, чтобы начать запись видео, а затем нажмите на нее еще раз, чтобы остановить запись и автоматически сохранить ее.


3. Галерея: Нажмите на нее, чтобы проверить сохраненные изображения или воспроизвести видео.
4. Кнопка поворота: каждый раз поворачивать на 90 градусов по часовой стрелке
5. Настройка: выберите разрешение 640*480; 1280*720; 1600*1200 и 1920*1080.

КАК ПОДКЛЮЧИТЬ К КОМПЬЮТЕРУ?

- 1) скачать rc.rar по ссылке:
<http://www.51scope.cn/files/setup.rar>
Мы обещаем, что вирус не включен!
- 2) Откройте файл rc.rar., выберите ViewPlayCap и установите файл setup.exe на ПК.
- 3) Подключите адаптер USB 2.0 к этому устройству, подключите этот рекламный блок к вашему компьютеру.
- 4) Откройте ViewPlayCap, а затем выберите «Камера» в устройстве AUTORUN.INF ViewPlayCap setup.exe

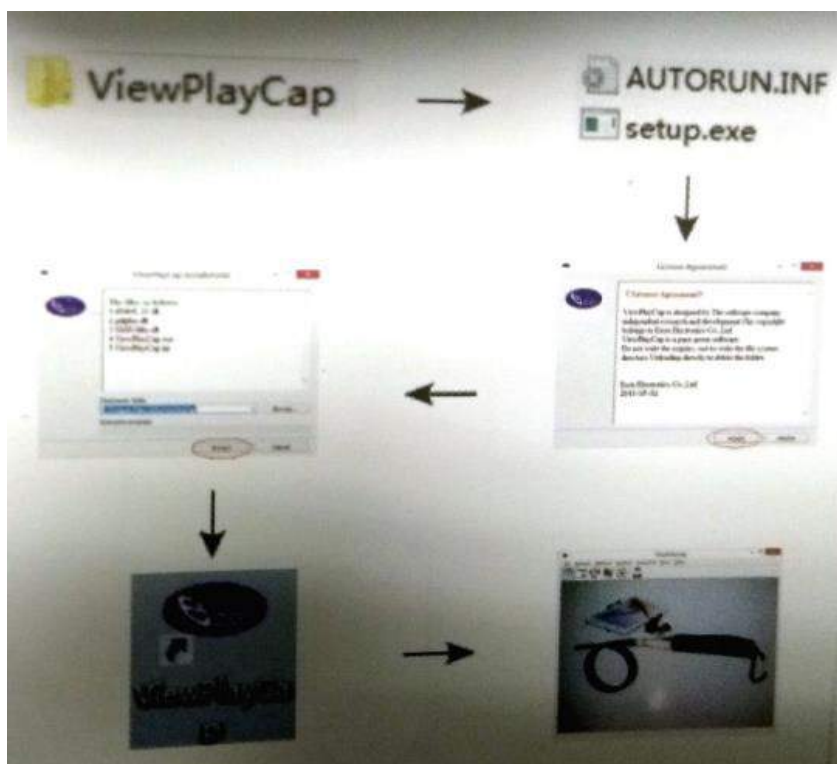


5) Как сделать фото на компьютере?

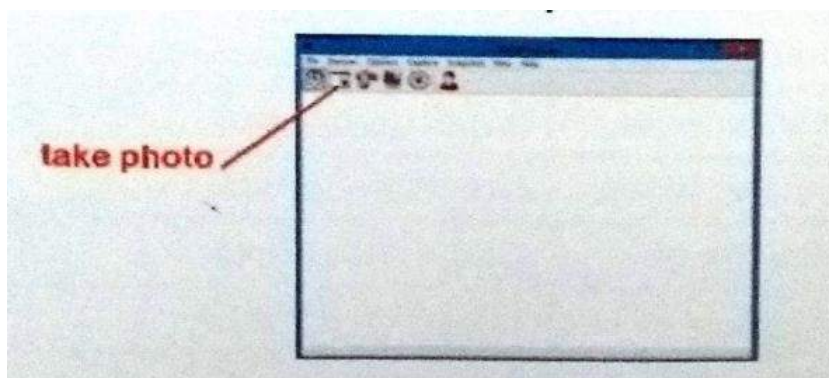


6) Как записать видео на компьютер?

1: сначала установите «файл» на ПК.

2: нажмите «Захват» в начале и в конце, тогда видео будет сохранено в файле, который вы установили.

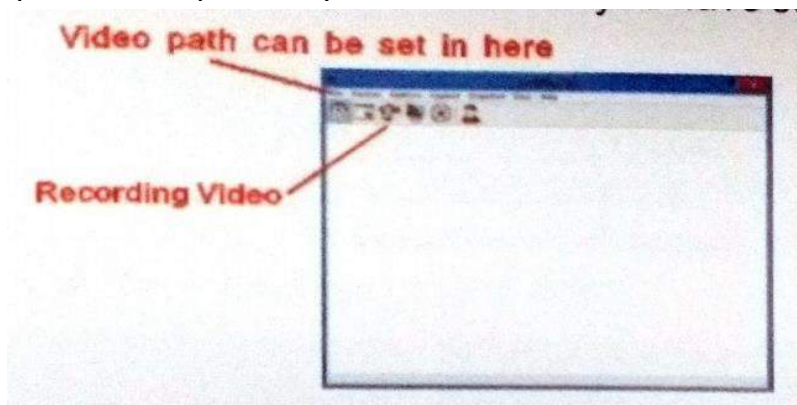

7) Как конвертировать между ПК и между камерой эндоскопа?

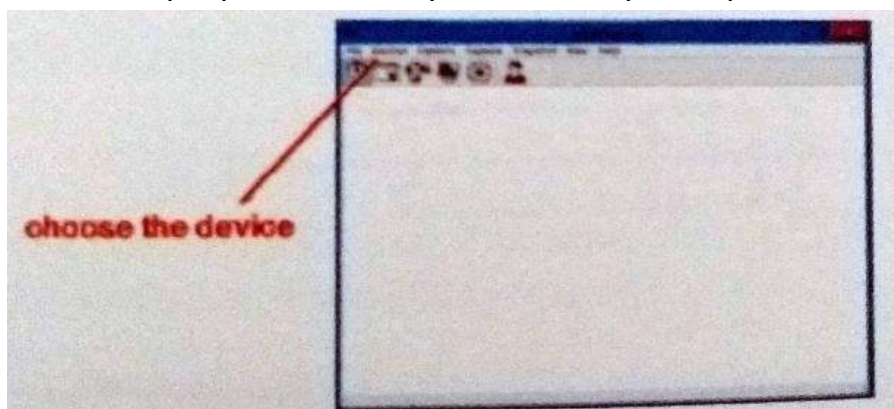

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**