



# **MINICAM24**

## **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

### **Алкотестер «Аlco 5500»**



## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.....	3
ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ .....	4
СХЕМА АЛКОТЕСТЕРА .....	5
УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ.....	5
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕСТЕРОМ АЛКОГОЛЯ .....	6
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ.....	8
РЕЖИМ ПЕРЕЗАПУСКА .....	8
МЕТОД УСТАНОВКИ .....	9
РЕЖИМ ПРОВЕРКИ ЗАПИСЕЙ В ПАМЯТИ .....	9

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Благодарим Вас за выбор и покупку измерителя концентрации. Пожалуйста, внимательно прочтите это руководство, чтобы убедиться, чтобы правильно использовать продукт.

Это устройство следит за вашим здоровьем; оно предназначено для контроля чрезмерного употребления алкоголя, чтобы держать вас в форме, путем тестирования алкоголя в вашем дыхании и расчета содержания алкоголя в крови. Продукт применим для домашнего использования, а также для определения алкогольного опьянения у водителей

На результат теста может повлиять целый ряд аспектов, таких как температура окружающей среды, различные газы в воздухе, курение и т. д. таким образом, результат должен быть только для справки и не должен расцениваться как оправдание для водителей с алкогольным опьянением.

ВАС	Дозозависимые Эффекты
0.020-0.039%	Никакой потери координации. Легкая радость или потеря застенчивости. Депрессивные эффекты не ясны.
0.040-0.069%	Общее ощущение благополучия, расслабленности, застенчивости и ощущение тепла снижаются. Радость. Некоторые незначительные нарушения мышления и памяти. Снижение осторожности. Навыки вождения могут быть нарушены.
0.070-0.099%	Незначительное нарушение равновесия, речи, зрения, времени реакции и слуха. Радость. Рассудительность и самоконтроль снижаются. Осторожность, рассудок и память нарушены. Навыки вождения всегда нарушаются.
0.100-0.129%	Серьезное нарушение координации движений и потеря здравого смысла.

	Речь может быть невнятной. Баланс, зрение, время реакции и слух будут нарушаться. Радость.
0.130-0.159%	Грубое нарушение моторики и отсутствие физического контроля. Помутнение зрения и серьезная потеря равновесия. Радость уменьшается, и начинает появляться состояние недомогания.
0.160-0.190%	Преобладает тревога, беспокойство. Может появиться тошнота


## ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

После вскрытия упаковки, пожалуйста, проверьте детали и компоненты ниже. Если кто-то отсутствует, пожалуйста, обратитесь к дилеру.

Аксессуары

1. Один детектор концентрации алкоголя на цифровом дисплее AT-5500.
2. Одно Руководство Пользователя.
3. Три щелочных батарейки типа ААА.
4. 5 труб для продувки воздухом.
5. Одна стропа.

## СХЕМА АЛКОТЕСТЕРА

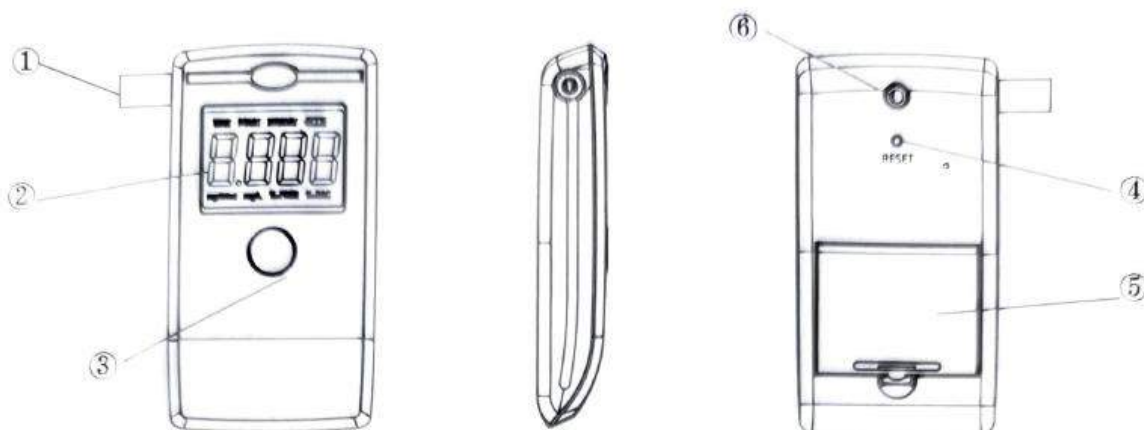

1. мундштук (сменный)
2. Экран
3. Включение
4. Сброс настроек (к1)
5. Батарейный отсек
6. Вентиляционное отверстие

## УСТАНОВКА БАТАРЕЙКИ

1. Открой заднюю крышку
  2. Когда установите Щелочные батареи 1.5V AAA или две батареи с одинаковой спецификацией правильно вставляются в корпус батареи (а S показано на рисунке ниже) в соответствии с отметками " + " и " - " на корпусе, а затем хорошо закрывают крышку (как показано на рис. 2)
  3. Установите заднюю крышку
- Если символ батареи на ЖК-дисплее мигает, это указывает на то, что электричества батареи недостаточно и батареи необходимо заменить, чтобы обеспечить точность теста. Откройте крышку батарейного отсека, выньте батарейки и установите новые батарейки с той же спецификацией (как показано на рисунке). Убедитесь, что старые батареи находятся в недоступном для детей месте, пожалуйста, утилизируйте батарейки в соответствии с местными правилами.



## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕСТЕРОМ АЛКОГОЛЯ

Оперативная процедура:

Подождите


Нажмите кнопку питания примерно через 2 секунды, ЖК-дисплей тестера алкоголя загорится с одним звуковым сигналом.


На дисплее появляется символ: "WAIT", и начинается обратный отсчет от 20 до 0, указывающий на то, что тестер находится в режиме разогрева.

**ЗАПИСКА**

Если первая разогревка закончилась, тестер автоматически сбрасывается и снова разогревается в течение 1-2 раз.


Он всегда имеет большое количество газа и примесей, адсорбированных на поверхности датчика алкоголя, когда вы впервые достаете тестер из упаковки или после длительного времени не используете его для тестов, ему нужно больше времени для очистки и разогрева датчика алкоголя, вы должны нажать кнопку питания и повторить попытку несколько раз, если это возможно.

Символ "BLOW" отображается, когда разогрев успешен, и начинается обратный отсчет , указывающий на то, что тестер находится в тестировании.

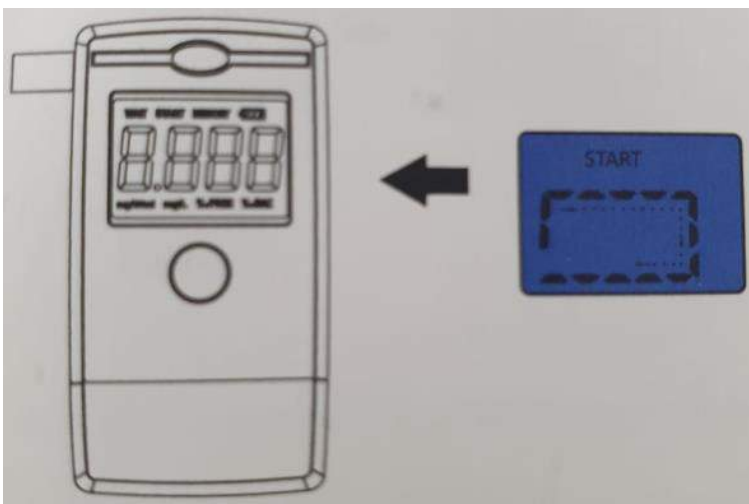

Слушайте и вдыхайте в дыхательный ингалятор в течение 3-5 секунд.

Анализ результатов исследования...

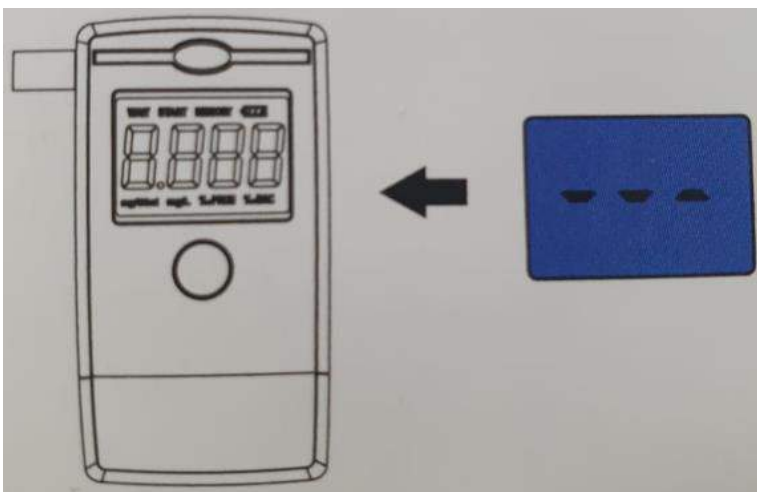

Прочитайте результат теста от тестера алкоголя.



Преобразование единиц измерения



## АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ

1. После того, как результат будет отображаться в течение примерно 10 секунд, символ "выкл" появится через 2 секунды, и тестер алкоголя будет выключен.
2. В случае неудачи тестер автоматически выключится.
3. Длительное нажатие кнопки питания для включения устройства и длительное нажатие еще раз для выключения в любом режиме.

## РЕЖИМ ПЕРЕЗАПУСКА

После отображения результата тестирования нажмите кнопку питания, чтобы повторно активировать режим тестирования напрямую, нужно подождать, пока он выключится, чтобы нажать кнопку питания.

Установить формат отображения результатов измерения единицы измерения


Объяснение для 6 видов единиц измерения в таблице.

№	Значение
0	%BAC
1	%OBAC
2	Mg/L
3	g /
4	Mg/100ml
5	%oProm

Способ настройки

1. В режиме тестирования после включения продукта, один клик (K1) в течение 4 секунд отображения "ждать", чтобы перейти в режим POINTSETTING. Пожалуйста, проверьте следующее изображение.
2. Затем нажмите кнопку (K1), чтобы выбрать нужный вам блок, после настройки блока Нажмите кнопку питания, чтобы выйти из режима настройки блока и вернуться обратно в режим тестирования.
3. Если в течение 15 секунд не будет никакой операции, он покажет "выкл", чтобы отключить продукт.



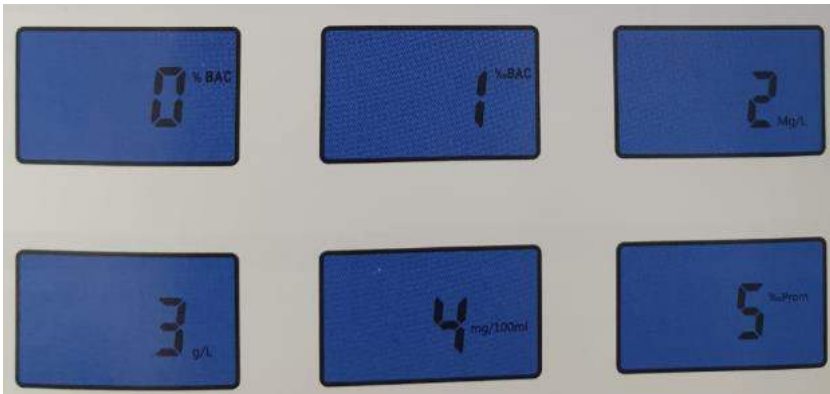

## МЕТОД УСТАНОВКИ

1. Дважды нажмите кнопку (K1) в режиме тестирования, чтобы перейти в режим настройки осторожности, как показано на следующем рисунке.
2. Сначала установите предупреждение, затем нажмите кнопку (K1) и включите питание, чтобы настроить данные предупреждения.
3. После настройки данных предупреждения продолжительное нажатие кнопки питания позволяет переключиться в режим опасности, затем нажмите кнопку K1 и Питание, чтобы настроить данные предупреждения.
4. После завершения настройки дважды нажмите кнопку POWER (K1), чтобы выйти из режима предупреждения, и вернитесь обратно в режим предупреждения.



## РЕЖИМ ПРОВЕРКИ ЗАПИСЕЙ В ПАМЯТИ

1. В течение времени тестового режима дважды нажмите кнопку питания, чтобы перейти к проверке записи REC режим, нажмите левую и правую кнопки K1 K2, чтобы проверить запись тестирования 1-32 раза.
2. в режиме REC дважды нажмите кнопку питания, чтобы выйти из режима проверки и вернуться обратно в режим тестирования.
3. Если в течение 15 секунд не будет никакой операции, он покажет "выкл", чтобы отключить продукт

**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**